

CAVEX IMPRESAFE

Un désinfectant et un liquide de nettoyage révolutionnaire pour les empreintes d'alginate, de polyéther et de silicone. Sûr, rapide et efficace. Ce produit est exempt de substances nocives comme les aldéhydes. De plus, il tue 99,99 % des bactéries, champignons et virus en seulement 3 minutes. Le temps de traitement court garantit que la surface d'empreinte reste 100 % intacte après la désinfection.



Cavex Impresafe

- HA053 Kit de démarrage Cavex ImpreSafe 1 unité
- HA050 Recharge Cavex ImpreSafe 6x 1000 ml

CAVEX LC DENTAL TRAY

Le Cavex LC Dental Tray est un matériau de porte-empreintes en résine photopolymérisable pour créer des porte-empreintes individuels ou fonctionnels. Le porte-empreinte Cavex LC Dental Tray présente une forme extra-large, éliminant



Cavex LC Dental Tray

- BP010 Cavex LC Dental Tray 50 pièces

CAVEX GREENCLEAN

Ce nettoyant est spécialement conçu pour éliminer l'alginate et le plâtre des porte-empreintes, des spatules et d'autres instruments. Le produit est rapide et facile à utiliser, au pH neutre et doux pour la peau. Il est également biodégradable et respectueux de l'environnement. Avec seulement 1 kg, vous pouvez nettoyer plus de 500 porte-empreintes tout en diffusant un parfum d'agrumes frais.



Cavex GreenClean

- HA001 Pot Cavex GreenClean 1 kg

ainsi la nécessité d'ajouter du matériau supplémentaire. De plus, le matériau est extrêmement facile à traiter. Le modèle est standard pour les modèles de mâchoire supérieure, mais peut également être utilisé pour les modèles de mâchoire inférieure en découpant la section palatine. Le Cavex LC Dental Tray durcit en seulement 3 à 5 minutes sous la lumière UV et halogène. Une fois correctement durci, le matériau est dimensionnellement stable.

MATÉRIAUX DE LABORATOIRE CAVEX

Nos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées et s'adaptent parfaitement sur les exigences spécifiques des laboratoires dentaires techniques et prothétiques.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays-Bas | cavex.nl



ZY400F01

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

SYSTÈME CAVEX VACUFORMER

Le système Cavex VacuFormer est un système complet de thermoformage sous vide, composé du Cavex VacuFormer, de plaques à thermoformer, d'un composite de plâtre unique et de divers accessoires. Le Cavex VacuFormer est un appareil de thermoformage sous vide polyvalent, robuste et sans fioritures, idéal pour créer des attelles, des gouttières de blanchiment individuelles, des protège-dents et d'autres applications de thermoformage dentaire classiques.

La machine est équipée d'un puissant moteur d'aspiration électrique adapté à toutes les applications courantes. Le VacuFormer est protégé contre la surchauffe, ce qui garantit un fonctionnement non seulement simple, mais sûr et fiable. Le kit de démarrage comprend tout l'équipement et les matériaux nécessaires pour produire immédiatement des applications de thermoformage prêtes à l'emploi.



Kit de démarrage Cavex VacuFormer

- VF001** 12 Cavex Mouth Protector Transparent 3,8 mm, 25 Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm, 20 ensembles Instant Stone avec activateur et ciseaux.

ACCESSOIRES DU SYSTÈME CAVEX VACUFORMER

Cavex Instant Stone est un plâtre à prise rapide qui permet de produire un modèle en plâtre parfait directement au cabinet, en 15 minutes. En plus de ce modèle en plâtre, Cavex propose une gamme de plaques d'emboutissage pour la fabrication de protège-dents, d'attelles, de gouttières de blanchiment individuelles et de gouttières de bruxisme.



Accessoires du système Cavex VacuFormer

- VT012** Cavex Instant Stone avec activateur 20 ensembles
VT036 Cavex Mouth Protector Transparent 3,8 mm 12 plaques
VT033 Cavex Mouth Protector X-pro Transparent 5 mm 12 plaques
VT028 Cavex Splint+ Transparent 1,0 mm 25 plaques
VT026 Cavex Splint X-heavy Transparent 1,5 mm 25 plaques
VT022 Cavex Bleach Transparent 1,0 mm 25 plaques
VT030 Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm 25 plaques
VT027 Cavex Bruxism 2,0 mm 25 plaques

CAVEX SET UP WAX & YELLOW WAX

Cavex Set Up Wax est une cire de modelage de haute qualité. Les plaques de cire épaisses sont idéales pour la mise en place de prothèses complètes et partielles, la création de rebords occlusaux et les applications de cire de boîte. Grâce à son excellente adhérence aux porte-empreintes, la cire est très facile à utiliser. La cire a un faible retrait de coulée, reste modelable pendant de longues périodes et est à la fois dimensionnellement stable et élastique.



Cavex Yellow Wax est une variante plus molle, flexible et facile à modeler. Cela la rend idéale pour ajuster les porte-empreintes et bloquer les contre-dépouilles.



Cavex Set Up Wax

- WA004** Cavex Set Up Soft 500 g 23 plaques
WA005 Cavex Set Up Regular 500 g 23 plaques
WA002 Cavex Set Up Regular Flex 500 g 23 plaques
WA006 Cavex Set Up Hard 500 g 23 plaques
WA008 Cavex Set Up Extra Hard 500 g 23 plaques
WA015 Cavex Set Up Regular 2 500 g 115 plaques
WA016 Cavex Set Up Hard 2 500 g 115 plaques

Cavex Yellow Wax


- WB006** Cavex Yellow Wax 17 plaques

DENTAL BASEPLATES & INDIVIDUAL TRAYS

Grâce à une technologie de pointe, les plaques de base Cavex peuvent former un modèle tridimensionnel stable à partir d'une plaque bidimensionnelle, qui peut être facilement façonnée sur le modèle en plâtre après un bref réchauffement et facilement découpée. La variante « sans mica » améliore les performances en ajoutant de l'hydroxyde d'aluminium, empêchant la combustion et offrant un résultat final plus lisse et plus brillant. Les plaques de base Cavex sont solides, dimensionnellement stables et ont une épaisseur standard de 1,4 mm.



La gouttière individuelle Cavex, d'une épaisseur standard de 1,9 mm, offre un ajustement optimal et reste dimensionnellement stable, même en cas d'utilisation prolongée.

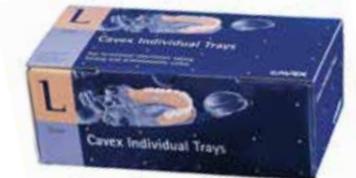

Cavex Baseplates

- BP004** Cavex Baseplates supérieures 100 pièces
BP054 Cavex Baseplates inférieures 100 pièces
BP024 Cavex Baseplates supérieures, double épaisseur 2,70-2,80 mm 50 pièces
BP005 Cavex Baseplates supérieures sans mica 100 pièces
BP055 Cavex Baseplates inférieures sans mica 100 pièces

Cavex Individual Trays

- BL006** Cavex Individual Trays supérieures 100 pièces