

BLANQUEAMIENTO SUPERIOR

CAVEX BITE & WHITE

PARA CLÍNICAS
DENTALES
SISTEMAS DE
BLANQUEAMIENTO

-

¡Soluciones de
blanqueamiento
seguras, eficaces
e indoloras!

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX



CAVEX

CAVEX BITE&WHITE PARA CLÍNICAS DENTALES

Para resultados de blanqueamiento óptimos con una sensibilidad mínima, Cavex ha desarrollado el sistema "Cavex Bite&White para clínicas dentales".

El gel blanqueador está basado en la revolucionaria tecnología de peróxido de hidrógeno superior (HPS), que logra resultados blanqueadores sin precedentes con peróxido de hidrógeno al 25 %. Gracias al gel de HPS extremadamente rápido y eficaz, se consigue el resultado de blanqueamiento óptimo en tan solo dos o tres sesiones.

El sistema de blanqueamiento de Cavex para uso en clínicas dentales es el único sistema en el que el gel blanqueador se aplica con un cepillo para un control total durante la aplicación. La barrera/espaciador de blanqueamiento también disponible protege el tejido blando circundante y cualquier área que no debe blanquearse.



BLANQUEAMIENTO SUPERIOR

HYDROGEN PEROXIDE SUPERIOR (HPS)

GEL BLANQUEADOR

- El gel blanqueador en el sistema Cavex Bite&White para clínicas dentales está basado en la tecnología de peróxido de hidrógeno superior (HPS) desarrollada y patentada por Cavex.

La tecnología HPS mantiene estable el peróxido de hidrógeno al 25 % muy puro. Como resultado, el gel está inmediatamente listo para su uso, sin necesidad de mezclado previo.

Debido a la composición única del gel de HPS, el peróxido de hidrógeno actúa más rápido y más eficazmente, de modo que el resultado de blanqueamiento óptimo ya se logra después de tan solo dos o tres tratamientos. Esto supone un ahorro tiempo para el dentista y una reducción del riesgo de sensibilidad para el paciente, ya que la sensibilidad aumenta a medida que se repite un tratamiento.

Las principales ventajas:

- El gel de HPS al 25 % Cavex Bite&White para clínicas dentales es el gel blanqueador más efectivo disponible.
- Gracias a los aceleradores en el gel de HPS se consigue el resultado de blanqueamiento óptimo después de tan solo dos o tres tratamientos.
- La consistencia más espesa permite una aplicación del gel de HPS muy controlada y asegura que el gel permanezca perfectamente en su lugar durante el tratamiento.
- El gel de HPS está listo para su uso sin necesidad de mezclado previo y puede mantenerse a temperatura ambiente, por lo que puede almacenarse fuera del refrigerador. La reacción comienza cuando entra en contacto con humedad (saliva).



El gel de HPS al 25 % Cavex Bite&White para clínicas dentales es fácil de aplicar



SISTEMAS DE BLANQUEAMIENTO PARA CLÍNICAS DENTALES

CAVEX

CAVEX BITE&WHITE

PARA CLÍNICAS DENTALES

Técnica única de aplicación

Solo el sistema de blanqueamiento para clínicas dentales Cavex Bite&White utiliza lápices con un cepillo para aplicar el gel blanqueador.

El lápiz es fácil de manejar y simplemente girando la parte posterior del lápiz se dosifica el gel en el cepillo. Esta técnica de aplicación única ofrece un control completo sobre la dosificación y aplicación del gel blanqueador.



BLANQUEAMIENTO SUPERIOR


CAVEX BITE&WHITE

BARRERA / SEPARADOR

-
La barrera/ el separador Cavex Bite&White se utiliza como barrera para evitar el contacto con los tejidos blandos y para proteger las áreas que no deben entrar en contacto con el gel blanqueador. El color azul de la barrera distingue el producto del entorno.

Con las puntas de aplicación incluidas, la barrera es fácil de aplicar y se endurece en 20 segundos con una lámpara de fotopolimerización. Después del tratamiento, la barrera es fácil de retirar.

La barrera/el separador Bite&White de Cavex no solo puede usarse como barrera en un tratamiento de blanqueamiento, sino también como separador en modelos de yeso para crear compartimentos para el gel blanqueador en las cubetas de blanqueamiento.

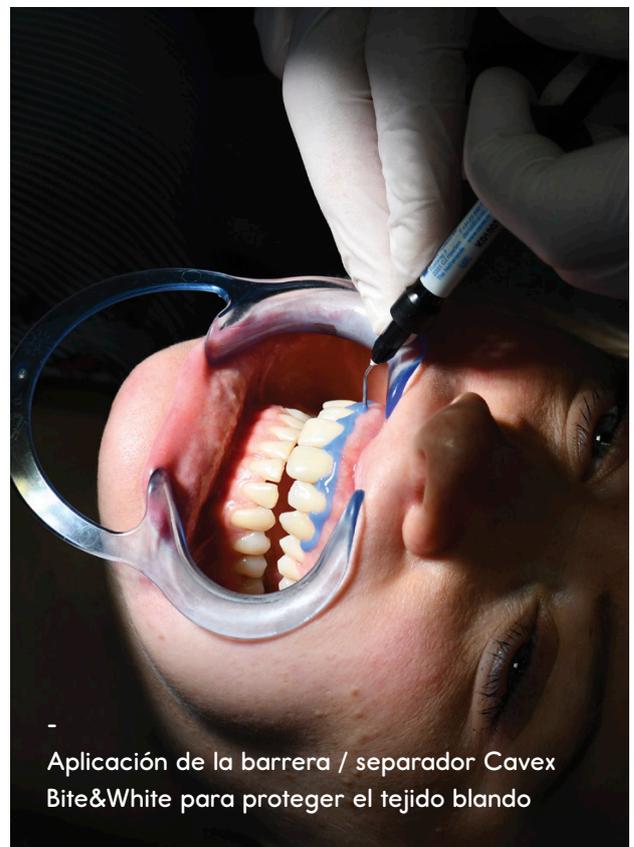

-
Aplicación de la barrera / separador Cavex Bite&White para proteger el tejido blando



SISTEMAS DE BLANQUEAMIENTO PARA CLÍNICAS DENTALES

PRESENTACIÓN

-

El sistema de blanqueamiento Cavex Bite&White para clínicas dentales consiste en:



Cavex Bite&White In-Office Starter Pack
(N° de art. BW050)

- 2 x lápices blanqueadores de 2 ml
- 1 x barrera/espaciador de 1 ml
- 5 x puntas de aplicación



Cavex Bite&White In-Office Barrier Bulk Pack
(N° de art. BW052)

- 3 x barreras/espaciadores de 1 ml
- 15 x puntas de aplicación



Cavex Bite&White In-Office Pen Bulk Pack
(N° de art. BW051)

- 12 x lápices blanqueadores de 2 ml



Todos estos productos vienen con un manual completo en diferentes idiomas.

BLANQUEAMIENTO SUPERIOR

CAVEX BITE & WHITE

PARA CLÍNICAS
DENTALES
SISTEMAS DE
BLANQUEAMIENTO

-
¡Soluciones de
blanqueamiento
seguras, eficaces
e indoloras!

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

